

Entkeimungslampen: LK-15 und LK-30 in 3 Ausführungen: mit Reflektor / ohne Reflektor / mit Filterplatte (filtert den sichtbaren Anteil des Lichtes heraus)



Vorsicht:
UV-Strahlen sind schädlich für Augen und Haut.
Tragen Sie immer einen adäquaten UV-Schutz.




UV-Schutz:

Katalog-Nr.	Beschreibung
29 93 100	UV-Schutzbrille mit Bügel
29 93 000	UV-Vollgesichtsschutz



Emissionsspektrum der UV-Röhre

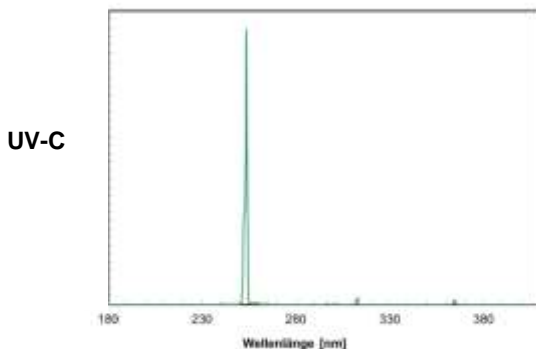

UV-Licht der Wellenlänge 254 nm

- **Entkeimung der Luft:** Man erreicht durch das UV-Licht, dass der gesamte Keimpegel im Raum stark herabgesetzt wird.
- **Entkeimung von Oberflächen:** Hier bitte beachten, dass im Strahlenschatten oder in Rissen das UV-Licht nicht wirken kann. Auch chemische Desinfektion durchführen.

Alle Herolab-Geräte tragen das CE-Zeichen. Herolab ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008 und Herolab behält sich das Recht auf technische Änderungen jederzeit vor.

Alle Modelle sind geeignet zur **Decken- oder Wandmontage** (Lieferung inkl. Set zur Wandbefestigung, Lochabstand: LK-15: 51 cm, LK-30: 97 cm) oder für **Rollstativ**.

Hinweis: Ab ca. 2,5 m Raumhöhe ist die **Abhängung mit einer Kette** von der Decke (Abhängungs-Set 29 55 850 muss separat bestellt werden) empfehlenswert und Bestellung mit Reflektor sinnvoll.




Modelle:



Modell	Kat.-Nr.	Beschreibung	beinhaltet 1 UV-Röhre
LK-30 R	29 55 800	Entkeimungslampe mit Reflektor	30 Watt UV-C (254 nm) ozonfrei
LK-30	29 55 810	Entkeimungslampe ohne Reflektor	30 Watt UV-C (254 nm) ozonfrei
LK-30 F	29 55 805	Entkeimungslampe mit Filter	30 Watt UV-C (254 nm) ozonfrei
LK-15 R	29 55 815	Entkeimungslampe mit Reflektor	15 Watt UV-C (254 nm) ozonfrei
LK-15	29 55 820	Entkeimungslampe ohne Reflektor	15 Watt UV-C (254 nm) ozonfrei
Rollstativ	29 55 200	Rollstativ mit max. Höhe 1,80 m	

Technische Daten:

- UV-Strahlung: 15 Watt bzw. 30 Watt UV-C (254 nm)
- Mittlere Lebensdauer der Röhren: 9.000 Stunden
- Netzanschluss: 220-240 Volt, 50/60 Hz
- Anschlusskabel: ca. 1,80 m mit offenem Ende
auf Wunsch auch mit Stecker lieferbar – ohne Aufpreis
standardmäßig mit Stecker und Schalter, wenn Bestellung mit Rollstativ
- Abmessungen und Gewicht:
LK-15: Länge: 52,4 cm Gewicht: ca. 1,6 kg / **LK-30:** Länge: 98 cm Gewicht: ca. 2,5 kg
beide: Breite 6 cm, Höhe 7 cm (nur Gehäuse) bzw. 12,5 cm (mit Reflektor und UV-Röhre)

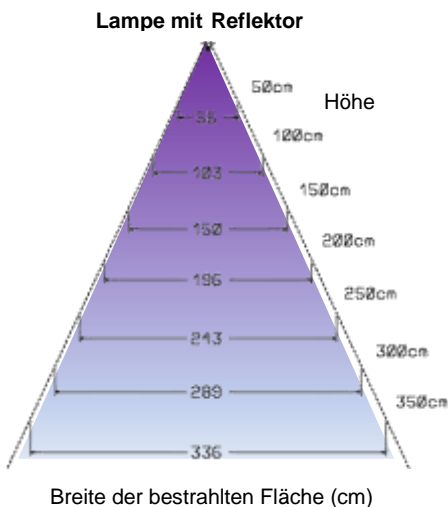

Ersatzteile und Zubehör:

Kat.-Nr.	Beschreibung
29 84 115	UV-Röhre, 15 W, 254 nm, ozonfrei
29 84 130	UV-Röhre, 30 W, 254 nm, ozonfrei
29 55 850	Abhängungs-Set
29 55 851	Set zur Wandbefestigung
29 93 000	UV-Gesichtsschutz, Vollgesichtsschutz

Alle Herolab-Geräte tragen das CE-Zeichen. Herolab ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008 und DIN EN ISO 13485. Herolab behält sich das Recht auf technische Änderungen jederzeit vor.